



Omvårdnadshjälpmedel



Hjälpmedelskonsulenter

Eva Scharin

Telefon: 021-17 58 57

E-post: eva.scharin@regionvastmanland.se

Sofie Söderbäck

Telefon: 021-17 68 34

E-post: sofie.soderback@regionvastmanland.se

Gemensam e-post: hmc.omvardnad@regionvastmanland.se

Innehållsförteckning

Hjälpmedelshandboken	1
Duschstolar med eller utan hjul	2
Förskrivning av hygienstol på hjul – att tänka på	3
Säkerhetstips	4
Produktinformation.....	5
Hygienstolar på hjul.....	5
S-41507 Swift Mobil 2.....	5
S-34039 Ocean 2	6
S-41572 Clean 55 cm.....	7
S-41839 Clean 49 cm.....	7
S-41838 Clean 44 cm.....	7
S-41508 Swift Mobil 2 tilt	8
S-16431 Ocean Vip.....	9
Hygienstol för tyngre brukare	10
S-41901 Hygienstol M2 bred ställbar	10
S-33073 Combistol bred	11
Produktinformation.....	12
Vårdsängar och tillbehör	12
Tillbehör till privata sängar, i urval	13
Stödhandtag för sängar utan sänggram/sarg.....	13
S-36515 Uppresningsstöd Eva std inkl golvplatta höjd 85 cm.....	13
S-36516 Uppresningsstöd Eva förhöjt inkl golvplatta höjd 100 cm	13
S-34693 Parnell uppresningsstöd.....	14
Fristående lyftbågar	15
S-06564 Fristående lyftbåge.....	15
Elryggstöd	16
S-16280 Elryggstöd Comfortabel Side 90 cm	16
S-16281 Elryggstöd Comfortabel Side 105 cm	16
S-43236 Elryggstöd Comfortabel Compact 90 cm	16
S-43237 Elryggstöd Comfortabel Compact 105 cm	16
Sängar med motoriserad reglering av sängbotten	17
Utprovning/förskrivning	18
Madrass till vårdsäng	18

Vårdsängar	19
S-32618 ScanBed 755 90 cm bred	19
S-16230 ScanBed 750 90 cm bred	19
S-33621 ScanBed 755 105 cm bred	19
S-16227 ScanBed 750 105 cm bred	19
Grindhöjder	20
Tillbehör till vårdsängar, i urval	20
Lågsäng	21
S-34799 Etude Plus low	21
Sängar för tunga brukare	22
S-35946 Qvintett large 105 cm	22
S-35954 Qvintett large 120 cm	22
S-35954 Octave 116 cm	22
Fallskyddsmatta	23
S-43430 Fallskyddsmatta	24

HJÄLPMEDELSHANDBOKEN

Utdrag från vårdgivarwebben:

<https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelshandboken/>

Omvårdnadshjälpmedel

Omvårdnadshjälpmedel är hjälpmedel som behövs för en patients omvårdnad, till exempel personlyft, dusch- och toalettstol på hjul och antidecubitusmadrass. Det är ibland samma typ av hjälpmedel som är arbetstekniska hjälpmedel. Omvårdnadshjälpmedel är ansvar 4-hjälpmedel som kommunerna har kostnadsansvaret för i särskilt boende och regionen i ordinärt boende.

Artikelansvar

- **Ansvar 1** – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
- **Ansvar 2** – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
- **Ansvar 3** – Rekvisitionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda, griptång och sängklossar.
- **Ansvar 4** – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

Duschstolar med eller utan hjul

ISO-kod 09 33 07

Kriterier för förskrivning

Dusch- och toalettstolar på hjul kan förskrivas till patient som inte kan förflytta sig på annat sätt till och från toaletterum eller duschplats.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Nivå 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Tänk på:

Reseduschstol finns för korttidsuthyrning vid resor. För mer information kontakta kundtjänst.

Förskrivning av hygienstol på hjul – att tänka på

Patienten:

- Längd, vikt, kroppsbyggnad?
- Funktionshinder, diagnos?
- Sitta länge? Smärta? Sår?
- Körd av vårdare eller köra själv m drivhjul?
- Förflyttningssätt till stolen? Låg förflyttning el personlyft?
- En eller flera användare?

Hur/var ska stolen användas?

- Över toalett och i dusch? Höjd på toaletten (utan sittring)?
- Enbart i duschen? Hel sits utan håll?
- Trångt? Dörröppning, runt toalett, i duschen?
- Köra långt m stolen? Över trösklar?

Exempel på tillbehör:

- Mjuksitsar
- Bäckben + bäckengejder
- Barriär/tvärslå
- Mjukrygg
- Amp.benstöd

Säkerhetstips

Parkera alltid hygienstolen med länkhjulen framåtriktade, det minskar tipp risken framåt!

Barriär/tvärslå är ett tillbehör som enbart används för att den som sitter i ska ha någonting att hålla i och känna sig lite säkrare. Får ej ersätta tillsyn av personal och förhindrar inte fall/urglidning!

Tippstolar skall köras i upprätt läge och tippas först när hjulen är bromsade. Om man av t.ex. medicinska skäl är tvungen att köra stolen tippad, bör man vara extra försiktig. Vid körning över trösklar rekommenderas att man backar.

Extra försiktighet bör även iaktas vid körning av tunga, tonusökade eller amputerade personer.

PRODUKTINFORMATION

Hygienstolar på hjul

Swift Mobil 2

Leverantör: Etac



S-41507 Swift Mobil 2

Upphandlad lagervara

Höjd: Ställbar 45-60 cm

Totalbredd: 58 cm

Brukarvikt: Max 160 kg

Armstöd ställbara i bredd och höjd.

Ställbar rygglädsel. Sits med öppning bakåt.

Tillbehör (komponenter) i urval:

S-41600 Bäckens/ uppsamlingskärl med lock

S-41510 Mjuksits höjd 2 cm

S-41511 Mjuksits höjd 4 cm

S-01805 Tvärså/barriär 60,5

S-41653 Höft/brösthälte mjukt

S-41509 Ben/vadstöd

Ocean 2

Leverantör: Invacare



S-34039 Ocean 2

OBS! Utgången hos leverantör, förskrivs enbart vid tillgång på lagret.

Höjd: Ställbar i höjd 47,5-60 cm

Totalbredd: 56 cm

Brukarvikt: Max 150 kg

Tillbehör/komponenter i urval:

S-13966 Mjuksits standard

S-16370 Mjuksits ovalt hål

S-34593 Mjuksits extra mjuk

S-15223 Ryggkudde med sidostöd

S-11082 Uppsamlingskärl med lock

S-15140 Barriär/tvärslå

S-14297 Drivhjul 24 "

S-16433 Breddningssats armstöd

S-18078 Höftbälte

S-18564 Brösthälte

Clean

Leverantör: Etac



S-41572 Clean 55 cm

S-41839 Clean 49 cm

S-41838 Clean 44 cm

Beställningsvara

Höjd: Finns i tre olika höjder, 55, 49 och 44 cm.

Totalbredd: 50 cm

Brukarvikt: Max 130 kg

Tillbehör (komponenter) i urval:

S-32098 Bäckén/ uppsamlingskärl utan lock

S-41600 Bäckén/ uppsamlingskärl med lock

S-17227 Barriär/ tvärså

S-17380 Mjuksits

S-17313 Mjukrygg

Swift Mobil 2 Tilt

Leverantör: Etac



S-41508 Swift Mobil 2 tilt

Upphandlad lagervara

Höjd: Ställbar 50-60 cm

Totalbredd: 58 cm

Brukarvikt: Max 160 kg

Armstöd ställbara i bredd och höjd.

Ställbar ryggklädsel. Sits med öppning bakåt.

Nackstöd ingår.

Tillbehör (komponenter) i urval:

S-41600 Bäckén/ uppsamlingskärl med lock

S-41510 Mjuksits höjd 2 cm

S-41511 Mjuksits höjd 4 cm

S-01805 Tvärså/barriär 60,5

S-41653 Höft/brösthälte mjukt

S-41509 Ben/vadstöd

Ocean VIP

Leverantör: Invacare



S-16431 Ocean Vip

OBS! Utgången hos leverantör, förskrivs enbart vid tillgång på lagret.

Höjd: Ställbar i höjd 51-61 cm

Totalbredd: 59,5 cm

Brukarvikt: Max 150 kg

Tillbehör (komponenter) i urval:

S-17919 Mjuksits standard

S-16370 Mjuksits ovalt hål

S-34593 Mjuksits extra mjuk

S-15223 Ryggkudde m sidostöd

S-11082 Uppsamlingskärl m lock

S-15140 Barriär/tvärslå

S-16433 Breddningssats armstöd

S-18078 Höftbälte

S-18564 Brösthälte

Hygienstol för tyngre brukare

Hygienstol M2 bred

Leverantör: HMN



S-41901 Hygienstol M2 bred ställbar

Höjd: Ställbar i höjd 46-54 cm

Totalbredd: 68 cm

Sittbredd: 56 cm

Bredd mellan armstöd: 56 cm

Brukarvikt: Max 200 kg

Tillbehör (komponenter):

S-37514 Uppsamlingskärl/bäcken

Combistol bred

Leverantör: Handicare



S-33073 Combistol bred

OBS! Utgången modell, förskrivs enbart vid tillgång på lagret.

Höjd: Ställbar i höjd 50,5-63 cm

Totalbredd: 64 cm

Sittbredd: 51 cm

Bredd mellan armstöd: 53 cm

Brukarvikt: Max 200 kg

Tillbehör (komponenter):

S-34661 Uppsamlingskäril hink

S-37698 Uppsamlingskäril nyckelhålsform

PRODUKTINFORMATION

Vårdsängar och tillbehör

18 12 24 Ställbara rygg- och benstöd

Ställbara ryggstöd, manuella

Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast och Distriktsköterska

Nivå: 3

Ställbara ryggstöd, elektriska

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast

Nivå: 4

Kriterier: Göra det möjligt för brukare att självständigt ta sig i och ur säng, eller för att underlätta för vårdare.

För att underlätta andningen för svårt hjärt- och lungsjuka.

18 12 27 Sänggrindar och lyftbågar

Sänggrindar

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast

Nivå: 4

Kriterier: För att förhindra fall ur sängen eller som hjälp vid förflyttning.

Lyftbågar (dävert)

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast

Nivå: 4


För fristående lyftbågar se 12 30 09

Tillbehör till privata sängar, i urval

Stödhandtag för sängar utan sänggram/sarg

Uppresningsstöd EVA

Leverantör: Swereco

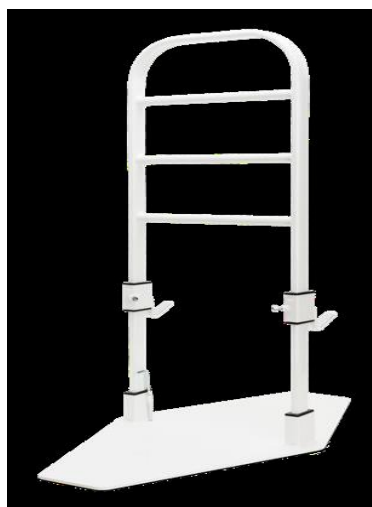

S-36515 Uppresningsstöd Eva std inkl golvplatta höjd 85 cm

Lagervara

S-36516 Uppresningsstöd Eva förhöjt inkl golvplatta höjd 100 cm

Lagervara

Brukarvikt: Max 150 kg

Passar sängar där avstånd golv undersida är minst 6 cm och har en kant under sängbotten som är 2,5-6 cm bred.

Parnell

Leverantör: Euforia



S-34693 Parnell uppresningsstöd

OBS! Utgången modell, förskrivs enbart vid tillgång på lagret.

Höjd: 81 cm

Bredd: 28 cm

Brukarvikt: Max 115 kg

Passar till sängar där avstånd golv-undersida säng är minst 5 cm och som har en kant under sängbotten som är max 3 cm bred.

Fristående lyftbågar

Fristående lyftbåge Leverantör: Human Care



S-06564 Fristående lyftbåge

Beställningsvara

Max belastning beror på handtagshylsans placering på röret och om sänglåsningstaget används.

Med sänglåsning: Inifrån och ut: 70 kg, i mitten 65 kg, längst ut 60 kg.

Utan sänglåsning: Inifrån och ut: 50, 45, 40 kg.

Elryggstöd

Comfortabel

Leverantör: ComfortSystem



S-16280 Elryggstöd Comfortabel Side 90 cm

Lagervara

S-16281 Elryggstöd Comfortabel Side 105 cm

Lagervara

Motorn monteras på höger eller vänster sida. Ange önskad motorsida vid förskrivning.

Byter du själv sida på motorn så var noga med att avsluta med att vrida motorn nedåt.



S-43236 Elryggstöd Comfortabel Compact 90 cm

Lagervara

S-43237 Elryggstöd Comfortabel Compact 105 cm

Beställningsvara

Nyhet i sortiment våren 2022. Motorn är placerad under ryggduken istället för på sidan.



Tillbehör (komponent):

S-33206 Stödhandtag

S-43408 Fästplåt

S-16315 Sittlås

OBS! Vid montering av stödhandtag på Elryggstöd Comfortabel Compact behövs en fästplåt (liten metallplatta).

Sängar med motoriserad reglering av sängbotten

ISO-kod 18 12 10

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut

Nivå: 4

Kriterier:

- Göra det möjligt för brukare att självständigt ta sig i och ur sängen.
- Göra det möjligt för svårt funktionshindrade, som vistas stor del av dagen i sängen, att självständigt kunna göra lägesändringar.
- För att underlätta andningen för svårt hjärt- och lungsjuka.
- Att underlätta för vårdaren när brukaren vårdas helt eller delvis i sängen.
- För funktionshindrade föräldrar att kunna sköta sitt barn (barnsäng).

Utprovning/förskrivning

Innan säng förskrivs, ska möjlighet utredas om patientens egen säng kan utrustas med något tillbehör, t ex stödhandtag/uppresningsstöd, manuellt eller elektriskt sängryggstöd, förhöjningsklossar eller fristående lyftbåge.

OBS! En undermålig säng, eller avsaknad av egen säng, är inte skäl för förskrivning, om brukaren i övrigt inte uppfyller något av kriterierna.

Standardsängarna i sortimentet är 90cm breda. Bredare säng, 105 cm bred, kan förskrivas då patienten ej får plats i standardsäng. Skäl kan även vara vändningssvårigheter.

Ev. tillbehör registreras som **komponenter**.

Ange **rätt leveransadress** och **telefonnummer** till kontaktperson som kan kontaktas för bokning av leverans och som kan öppna och ta emot sängen.

Ange även gärna på förskrivningen om det är **trappor eller hiss** upp till bostaden, samt ev annat som kan vara bra för transportörerna att känna till.

Madrass till vårdsäng

Standardmadrass till förskriven vårdsäng är patientens ansvar.

Rekommenderat madrassmått är 90x200x12cm.

Standardmadrass köps i öppna handeln eller på Hjälpmedelscentrum, som tillhandahåller en vårdmadrass med hygienöverdrag (S-36279).

Undantag görs vid vård i livets slutskede då kan standardmadrass med hygienöverdrag förskrivas.

Undantag görs också för madrasser till 105 cm bred säng, som är kostsamma och svåra att få tag i, i öppna handeln. Kan därför förskrivas i samband med förskrivning av vårdsängen.

VÅRDSÄNGAR

Scanbed 750/755 Leverantör: Invacare



S-32618 ScanBed 755 90 cm bred (SB755)

Upphandlad lagervara

Brukarvikt: 200 kg

S-16230 ScanBed 750 90 cm bred (SB750)

OBS! Utgången modell, förskrivs enbart vid tillgång på lagret.

Brukarvikt: 185 kg

S-33621 ScanBed 755 105 cm bred (SB755)

Upphandlad lagervara

Brukarvikt: 200 kg

S-16227 ScanBed 750 105 cm bred (SB750)

OBS! Utgången modell, förskrivs enbart vid tillgång på lagret.

Brukarvikt: 185 kg

ScanBed-sängarna har 4-delad liggyta, integrerade gavlar/grindar och centralbroms som standard.

Liggytan har inbyggd förlängning. Om extra lång säng önskas, förskrivs extra långa grindar via Uppladdningstjänsten eller pappersförskrivning.

Grindhöjder

SB 755 = 40 cm från liggytan, rekommenderad madrasshöjd max 18 cm.

SB 750 = 34 cm från liggytan, rekommenderad madrasshöjd max 12 cm.

Tillbehör till våldsängar, i urval

S-16157 Stödhandtag 25x30

S-16158 Stödhandtag 40x30

S-16412 Stödhandtag 40x50

S-13847 Lyftbåge

S-35914 Grindförhöjningsribba (+15cm) till grind Britt 5 (trä)

S-39682 Grindförhöjningsribba (+15cm) till grind Line (aluminium)

S-15877 Extralånga grindar till SB750

S-34563 Extralånga grindar till SB755

S-16357 Grindskydd galon till SB750

S-16354 Grindskydd nät till SB750

S-34843 Grindskydd galon till SB755

S-34859 Grindskydd nät till SB755

S-33986 Förlängningsdel madrass 15x90x14 cm

Lågsäng

Etude

Leverantör: Invacare



S-34799 Etude Plus low

Beställningsvara

Lågsäng, liggytan går att ställa i två olika höjder. Lägsta höjd 20 alt 27 cm, högsta höjd 60, alt 67 cm. Monteras vid leverans i önskat läge, ange detta vid förskrivning.

Bäddmått 90x200 cm. Integrerade grindar, individuellt bromsade hjul.

Brukarvikt: 165 kg.

Tillbehör: samma som till ScanBed-sängarna.

Vid förlängning behövs en förlängningsdel, S-35995 (10 cm) och S-42516 (20 cm).

Sängar för tunga brukare

S-35946 Qvintett large 105 cm

Beställningsvara

Bäddmått 105x200 cm

Brukarvikt: 250 kg

S-35954 Qvintett large 120 cm

Beställningsvara

Bäddmått 120x200 cm

Brukarvikt: 250 kg

S-35954 Octave 116 cm

Beställningsvara

Bäddmått 115x200 cm

Brukarvikt: 350 kg

Fallskyddsmatta

ISO-kod 18 33 90

Kriterier för förskrivning

Fallskyddsmatta används vid säng för att minska risk för skada i samband med fall.

Fallskyddsmatta kan förskrivas till patient med nedsatt gång-och/eller kognitiv förmåga, som trots att fallpreventiva åtgärder vidtagits, riskerar att falla ur eller vid säng/vårdsäng.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Fallskyddsmatta kombineras med fördel med en extra låg vårdsäng och rörelse- eller sänglarm, till motoriskt oroliga patienter.

Observera att viss snubbelrisk kan förekomma vid användning av gånghjälpmedel på fallskyddsmatta

Fallskyddsmatta

Fallskyddsmatta Leverantör: Salubrious



S-43430 Fallskyddsmatta

Beställningsvara

Nyhet i sortiment hösten 2022.

Längd: 180 cm

Bredd: 101,5 cm

Transportväska ingår.