

Innehåll

Kontakter	1
Övergripande nyheter från Laboratoriemedicin	2
Nytt format för Meddelande från Laboratoriemedicin.....	2
Provinlämning i kylskåp på Jurlaboratoriet Västerås	3
Nyheter från Klinisk mikrobiologi.....	4
Rätt provtagningsset för MRSA-screening	4
Nytt meningit/encefalitblock beställningsbart i Cosmic	5
Provtagningsmaterial för SARS-CoV-2.....	5
Nyheter från Klinisk patologi.....	6
Försenade PAD-svar på grund av instrumenthaveri	6

Kontakter

Kundservice Laboratoriemedicin

021-17 35 50


laboratoriemedicin@regionvastmanland.se

Övergripande nyheter från Laboratoriemedicin

Nytt format för Meddelande från Laboratoriemedicin

Det här är första utskicket av Meddelande från Laboratoriemedicin i ett uppdaterat format. Några gånger om året samlas information, nyheter och förändringar inom Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi och Transfusionsmedicin i ett nyhetsbrev som detta. Däremellan kan eventuella akuta förändringar meddelas separat.

Jenny Reinerstedt, Samordnare Kommunikation

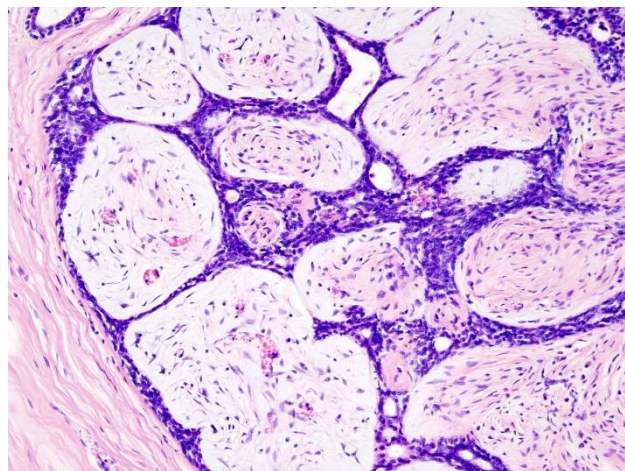

Provinlämning i kylskåp på Jurlaboratoriet Västerås


För att prover ska kunna hanteras på ett säkert sätt och komma fram så snabbt som möjligt är det viktigt att alla följer de instruktioner som finns på plats.

Under sommaren har ett nytt kylskåp installerats på Provinlämningen på Jurlaboratoriet i Västerås. Kylskåpet används för prover som ska transporteras vidare till Mikrobiologilaboratoriet.

Det gamla kylskåpet var slitet och började få svårt att hålla en stabil temperatur. I samband med detta har hyllplan i det nya kylskåpet märkts upp och ny skyltning med instruktioner och transporttider har tillkommit.

För att prover ska komma fram så snabbt som möjligt och hanteras på rätt sätt behöver alla hjälpas åt genom att följa de instruktioner som finns. Observera att alla prover som lämnas i kylskåp ska lämnas i transportlåda.

Känner du dig osäker, prata gärna med personalen på Provinlämningen så hjälper de till.

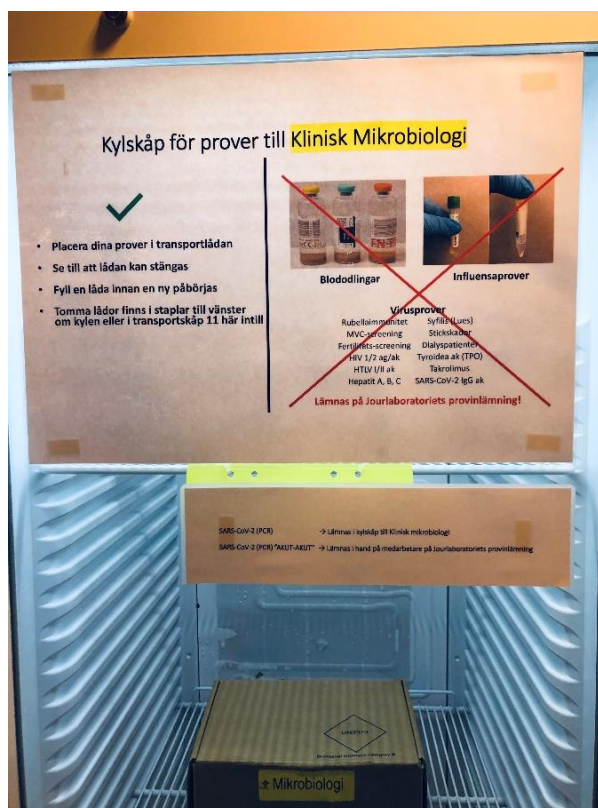

Anna Österberg, Processledare Provlogistik

Nyheter från Klinisk mikrobiologi

Rätt provtagningsset för MRSA-screening

Med start 1 oktober kommer MRSA-screening enbart att utföras på prover tagna i ESwab.

I april 2021 infördes en ny odlingsteknik för MRSA-screening som kräver att provet tas i flytande medium (eSwab). Från och med 1 oktober kommer analys inte utföras på prover som har tagits i andra rör.



Läs mer på Varuförsörjningen: <https://varuforsorjningen.se/artiklar/provtagningsmaterial-inklusive-vakuumror/provtagn-set-flytande-f-bakt-48245>

Elisabeth Freyhult, ST-läkare Klinisk mikrobiologi

Camilla Svensson, Processledare Allmän odling

Nytt meningit/encefalitblock beställningsbart i Cosmic

Med start 15 september kommer ett meningit/encefalitblock (PCR) att finnas beställningsbart i Cosmic.

Analysen är en molekylär multiplex-panel (FilmArray) som detekterar följande agens i likvor: *Escherichia coli K1*, *Haemophilus influenzae*, *Listeria monocytogenes*, *Neisseria meningitidis*, *Streptococcus agalactiae (GBS)*, *Streptococcus pneumoniae*, *cytomegalovirus*, *enterovirus*, *Herpes simplex virus 1*, *Herpes simplex virus 2*, *Humant parechovirus*, *Varicella zoster virus* och *Cryptococcus neoformans/gatti*. Vid stark misstanke om HSV 1/2 och negativt utfall på panelen rekommenderas komplettering med [Herpes simplex typ 1 och 2-PCR](#) på Focus eftersom Film Array har något lägre känslighet.

Analysen utförs dagligen. För svar samma dag bör provet vara Mikrobiologilaboratoriet tillhanda senast kl. 14.30 på vardagar och kl. 13.00 på lördagar och söndagar.

Vid patient ≥ 18 år utförs analysen enbart vid förhöjt antal leukocyter i likvor om inte annat anges vid beställning.

Daniel Heimer, Överläkare Klinisk mikrobiologi

Miriam Geörg, Molekylärbiolog

Provtagningsmaterial för SARS-CoV-2

Nasofarynxpinne i koksalt-rör ska även fortsatt användas vid provtagning för SARS-CoV-2.

Liksom tidigare är rekommenderat provtagningsmaterial för SARS-CoV-2 PCR nasofarynxpinne (blå kork) som sedan stoppas i sterilt plaströr med 2 mL 0,9 % NaCl-lösning. Klipp av pinnen så att locket kan skruvas på ordentligt.

Nasofarynxpinne (blå kork): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-f-nasofarynx-45605

Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862

Virocultrören kan inte längre beställas men är även fortsatt godkända att använda. UTM-rör som beskrivs på Varuförsörjningens hemsida som ersättning för Virocult-rör ska inte användas.

Elisabeth Freyhult, ST-läkare Klinik mikrobiologi

Zhino Omar, processledare Molekylärbiologi

Nyheter från Klinisk patologi

Försenade PAD-svar på grund av instrumenthaveri

På grund av en driftstörning för ett immunhistokemi-instrument på Patologilaboratoriet förekommer det några dagars fördröjning för vissa PAD-svar.

Instrumentet är nu åter i drift och laboratoriet arbetar hårt för att arbeta i kapp. Beställare kan ändå märka av förseningar ytterligare en tid. Kontakta laboratoriet vid eventuella frågor.

Mattias Karlman, Verksamhetschef Laboratoriemedicin, tf

Helena Olofsson, Överläkare Klinisk patologi, ställföreträdande MLA